

# Toedieningsinstructie Aranesp® SureClick™ 1

Lees voor u begint alle stappen aandachtig door!

## Bewaren van Aranesp voorgevulde pen



Bewaar altijd in de koelkast (2°C - 8°C). Niet invriezen.




Haal voor de toediening een voorgevulde pen uit de verpakking en laat deze in ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur komen.

30 minuten

## Overzicht van de onderdelen

### Voor gebruik

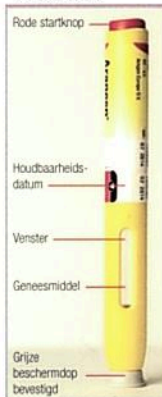

### Na gebruik



De naald zit in de gele beschermcap

## Geschikte toedieningsplaats



Aanbevolen plaats voor zelftoediening is uw dijbeen of buik (met uitzondering van het gebied van 5 centimeter rondom de navel).



Indien iemand anders de injectie bij u toedient, kan dit ook in de buitenkant van uw bovenarm.


## Vorbereiding



1. Laat de voorgevulde pen gedurende ten minste 30 minuten bij kamertemperatuur liggen voor de toediening.



2. Zorg ervoor dat u alle materialen voor uw injectie bij de hand heeft. Was uw handen goed met water en zeep en reinig de injectieplaats.

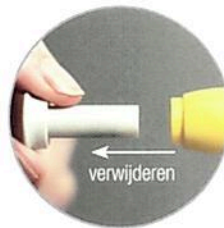

← verwijderen

3. Trek de grijze beschermcap er recht van af en pas wanneer u klaar bent om te injecteren. Laat de grijze beschermcap er niet langer dan 5 minuten af. Dan kan het geneesmiddel uitdrogen.




↳ strak trekken

4. Trek de huid goed strak door uw duim en vingers in tegenovergestelde richting te bewegen zodat er een gebied van ongeveer 5 centimeter breed ontstaat.

## Toediening




5. Blijf de huid strak trekken en plaats de voorgevulde pen in een hoek van 90 graden (loodrecht) op de huid zonder de rode knop aan te raken.

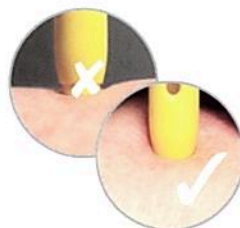

6. Duw de voorgevulde pen stevig tegen de huid aan, zodat de naaldbeschermcap helemaal in de pen verdwijnt. Raak de rode startknop nog niet aan.




7. Druk op de rode startknop zodra u klaar bent om te injecteren. U hoort nu een klik.

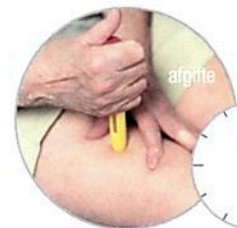

De injectie kan ongeveer 15 sec. duren.

8. Blijf de voorgevulde pen gedurende 15 seconden op uw huid drukken. Het is mogelijk dat u een tweede klik hoort, dit hoeft niet.

## Afronding

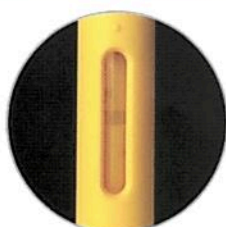

9. Controleer of het venster geel geworden is en haal de pen van de huid. De naald wordt automatisch afgeschermd.



10. Werp de gebruikte voorgevulde pen veilig weg.